


PASSEUR D'ÉCHANTILLONS DE LA SÉRIE TITRALAB AS1000

Domaines d'application

- Agro-alimentaire
- Eau potable
- Rejets industriels
- Rejets urbains

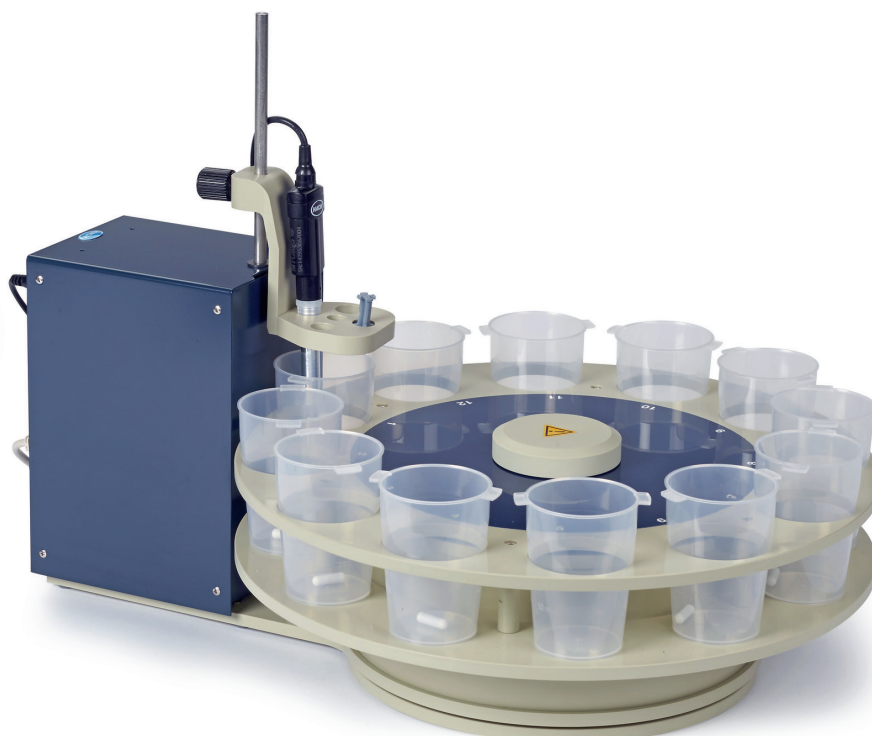

Le passeur d'échantillons AS1000 est la solution idéale pour l'automatisation des analyses des séries d'échantillons par titrage au laboratoire.

Automatisation facile du titrage des séries d'échantillons. Le passeur d'échantillons Titrilab AS1000 travaille avec les titrateurs AT1000 et le logiciel Windows TM1000 afin d'analyser automatiquement les séries d'échantillons (les passeurs d'échantillons AS1000 sont livrés avec le TM1000 et les câbles de connexion).

Exécuter des analyses d'échantillons en totale autonomie, sans intervention de l'utilisateur

Les échantillons sont placés sur un carousel rotatif et le passeur déplace les capteurs et les tubes dans chaque béchers pour analyse. La capacité maximale est de 30 béchers.

Automatisation complète pour gagner du temps

Les solutions d'automatisation multi-paramètres des passeurs d'échantillons AS1000 permettent aux opérateurs de gagner du temps sur les analyses fastidieuses et répétitives pour se consacrer à des tâches plus importantes qui ne peuvent pas être automatisées.



Exemple de configuration avec titrateur AT1000 et passeur d'échantillons AS1000

Données techniques*

Dimensions (L x P x H)	300 mm x 395 mm x 535 mm
Poids	Environ 10 kg
Alimentation (tension)	24 VDC, 60 VA; Sortie externe : 24 VDC, 1,33 A
Caractéristique électrique (Hz)	50/60 Hz
Interface	Série RS232
Agitateur	Magnétique
Matériel	Module de levage : acier émaillé et polypropylène ; module rotatif : polypropylène

Conditions de service	15 à 35 °C / De 20 à 80 % d'humidité relative, sans condensation
Conditions de stockage	-5 à 40 °C
Certifications	Sécurité : CEI/EN 61010-1; CEM : CEI/EN 61326-1
Garantie	2 ans

*Pièces de rechange

Référence de commande

Modèles de passeurs d'échantillons

AS1000.98.12150	Passeur d'échantillons de la série Titralab AS1000, 12 positions, béchers de 50 et 150 mL, pour deux sondes
AS1000.98.20090	Passeur d'échantillons de la série Titralab AS1000, 20 positions, béchers de 90 mL, pour une sonde
AS1000.98.30050	Passeur d'échantillons de la série Titralab AS1000, 30 positions, béchers de 50 mL, pour une sonde

Les passeurs d'échantillons AS1000 sont livrés avec le logiciel PC TM1000 et les câbles de connexion.

Accessoires et pièces de rechange

LZE108	Jeu de béchers, 50 mL, PP (10 pièces)
LZE109	Jeu de béchers, 150 mL (10 pièces)
LZE193	Jeu de béchers de 50 mL, PP (30 pièces)
LZE194	Jeu de béchers de 90 mL, PP (20 pièces)
LZE217	Barreaux magnétiques, 12 x 4,5 mm (30 pièces)
LZE136	Barreaux magnétiques, 20 x 6 mm (10 pièces)
LZE201	Carrousel, 20 positions, béchers de 90 mL
LZE202	Carrousel, 30 positions, béchers de 50 mL
LZE203	Carrousel, 12 positions, béchers de 50 mL & 150 mL
LZE213	Adaptateur de bague pour bécher, 50 mL (12 pièces)

Offres de services

Hach offre une large gamme de contrats de service qui peuvent être adaptés à vos besoins afin de maximiser la fiabilité de vos mesures et la disponibilité de vos instruments.

Contactez-nous afin de recevoir une offre de service adaptée à vos besoins.