


CAMBIADOR DE MUESTRAS SERIE AS1000

Aplicaciones

- Alimentación y bebidas
- Agua potable
- Aguas industriales
- Aguas residuales

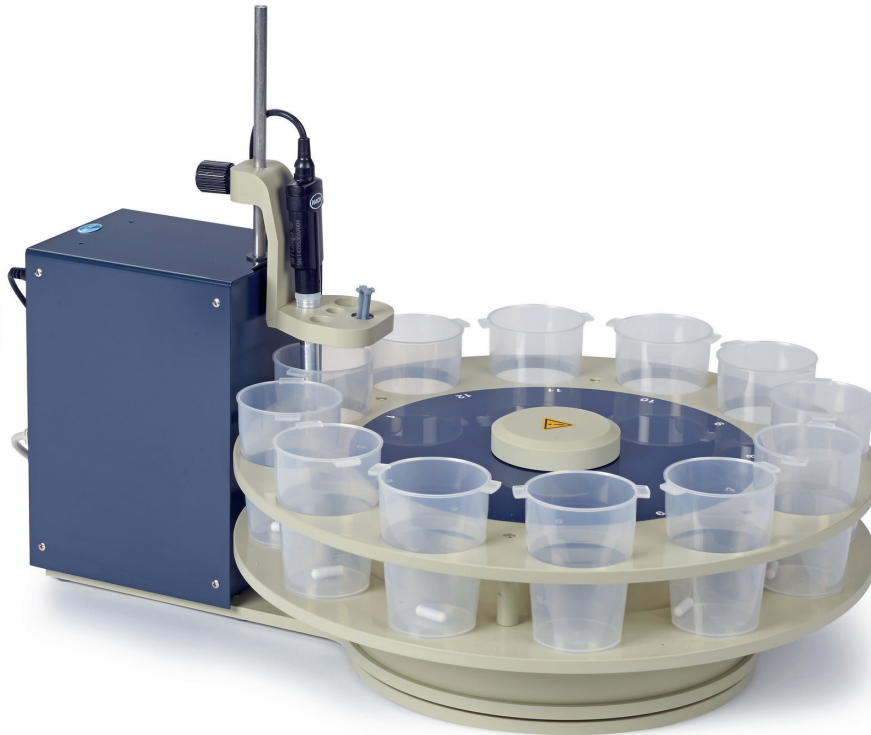

El cambiador de muestras AS1000 es el perfecto asistente de laboratorio para la automatización de análisis de series de muestras.

La valoración automática de series de muestras puede ser fácil. El cambiador de muestras serie AS1000 se utiliza junto con los valoradores de la serie AT1000 y con el software Windows TM1000 para realizar análisis de series de muestras de forma automática (el suministro de cambiador de muestras incluye el Software TM1000 PC y cables de conexión).

Realice análisis de muestras con total autonomía sin la intervención de usuarios

El módulo de rotación gira la bandeja para cambiar la posición de la muestra, mientras el módulo de elevación desplaza los sensores y los tubos verticalmente en cada muestra. Bandejas para muestras con un único radio con capacidad para un máximo de 30 muestras.

Automatización completa que le dejará más tiempo libre

Las soluciones de automatización multiparamétricas del cambiador de muestras AS1000 liberan al operador de análisis tediosos y repetitivos y le permiten centrarse en tareas más valiosas que no se pueden automatizar.



Configuración del sistema que incluye el valorador AT1000 y el cambiador de muestras AS1000



Be Right™

Datos Técnicos*

Dimensiones (A x A x P)	300 mm x 395 mm x 535 mm	Condiciones de operación	15 - 35 °C / 20 - 80 % HR, sin condensación
Peso	Aproximadamente 10 kg	Condiciones de almacenamiento	-5 - 40 °C
Requisitos de alimentación (voltaje)	Entrada del instrumento: 24 V DC, 60 VA; Fuente de alimentación externa: 24 V DC, 1,33 A	Certificaciones	Seguridad: IEC/EN 61010-1; compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1
Requisitos de alimentación (Hz)	50/60 Hz	Garantía	2 años
Interfaz	RS232 Serie	<i>*Sujeto a cambio sin previo aviso.</i>	
Agitador	Magnético		
Material	Módulo de elevación: acero esmaltado y polipropileno; módulo de rotación: polipropileno		

Información para pedidos

Modelos de cambiador de muestras

AS1000.98.12150	Cambiador de muestras serie AS1000, 12 posiciones, vasos de 50 mL y 150 mL, para dos sensores
AS1000.98.20090	Cambiador de muestras serie AS1000, 20 posiciones, vasos de 90 mL, para una sensor
AS1000.98.30050	Cambiador de muestras serie AS1000, 30 posiciones, vasos de 50 mL, para una sensor

El suministro de cada cambiador de muestras AS1000 **incluye el Software TM1000 PC** y cables de conexión.

Accesorios y piezas de repuesto

LZE108	Juego de vasos de 50 mL, PP (10 unidades)
LZE109	Juego de vasos de 150 mL, PP (10 unidades)
LZE193	Juego de vasos de 50 mL, PP (30 unidades)
LZE194	Juego de vasos de 90 mL de PP (20 unidades)
LZE217	Barra magnética, 12 x 4,5 mm (30 unidades)
LZE136	Barra magnética, 20 x 6 mm (10 unidades)
LZE201	Bandeja para muestras, 20 posiciones, vasos de 90 mL
LZE202	Bandeja para muestras, 30 posiciones, vasos de 50 mL
LZE203	Bandeja para muestras, 12 posiciones, vasos de 50 mL & 150 mL
LZE213	Anillo adaptador para vasos, 50 mL (12 unidades)

Contrato de Mantenimiento

Hach ofrece diferentes modalidades de contratos de mantenimiento según las necesidades del cliente que ayudan a maximizar la fiabilidad de las mediciones y el buen funcionamiento de todos los instrumentos.

Contáctenos para recibir una propuesta de nuestro servicio a su medida.