

LZY971

Introdução

ATENÇÃO


A segurança da rede e do ponto de acesso é da responsabilidade do cliente que utiliza o equipamento sem fios. O fabricante não é responsável por quaisquer danos, incluindo, entre outros, danos indirectos, especiais, incidentais ou consequenciais, causados por uma lacuna ou por uma violação da segurança da rede.

Utilize este kit para ligar um modem a um controlador SC1500, SC4200c ou DR3900.

Componentes do produto

Certifique-se de que recebeu todos os componentes. Consulte [Figura 1](#). Se algum dos itens estiver em falta ou apresentar danos, contacte imediatamente o fabricante ou um representante de vendas.

Figura 1 Componentes do produto

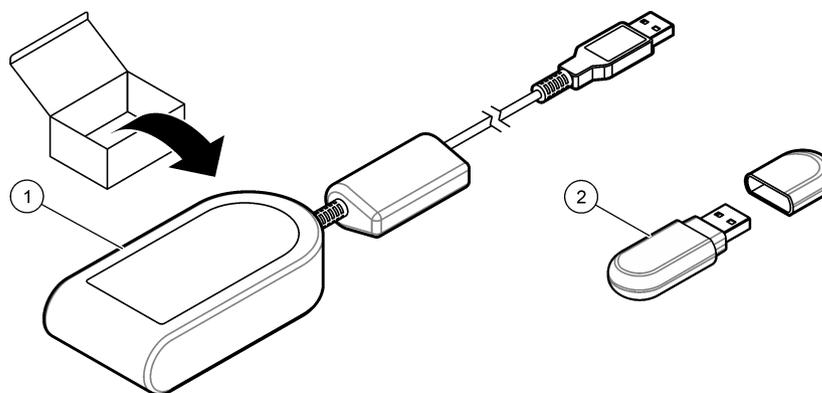

1 Modem MTD-H5¹

2 Unidade flash USB 2.0 (FAT32)

Controlador SC1500

Configurar o controlador

Configure o controlador com as informações do cartão SIM.

Itens a recolher:

- PC com acesso à Internet
 - Unidade flash USB
1. Consulte <http://sim.fsn.hach.com>.
 2. Seleccione o fornecedor do cartão SIM correto no menu pendente. Se um fornecedor não estiver na lista, seleccione a opção OTHERS (Outros).
 3. Introduza o nome do ponto de acesso (APN), o nome de utilizador e a palavra-passe indicados nas informações do fornecedor.
 4. Introduza o PIN do cartão SIM. Deixe o campo do PIN em branco se não estiver definido nenhum PIN.
 5. Clique em Download (Transferir). O ficheiro de configuração com o nome `sc1500_cfg_modem_1234.txt` (o número PIN é 1234) é guardado na pasta de transferência predefinida no PC.
 6. Ligue a unidade flash USB à porta USB do PC.
 7. Guarde o ficheiro de configuração do PC na pasta principal da unidade flash USB.
 8. Remova a tampa da caixa USB. Consulte [Figura 2](#).

¹ Está disponível informação adicional no website do fabricante.


9. Ligue a unidade flash USB à porta USB da caixa USB. O ficheiro de configuração é instalado automaticamente.

O controlador tem de permanecer ligado à corrente durante a instalação.

10. Remova a unidade flash USB após um período mínimo de 30 segundos.

Nota: Se a instalação for concluída com êxito, o ficheiro de configuração é eliminado da unidade flash USB.

Figura 2 Remover a tampa da caixa USB

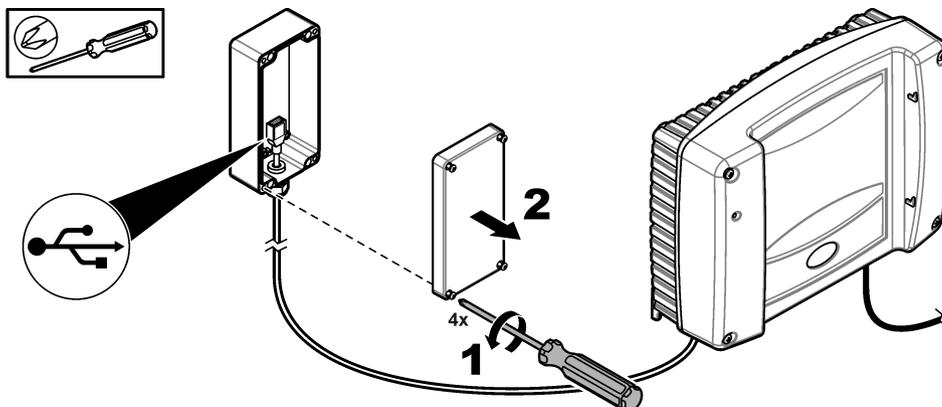

Ligar o modem

Ligue o modem ao controlador.

Nota: Certifique-se de que o controlador está ligado à corrente durante um mínimo de 5 minutos para concluir o processo de inicialização. Depois, ligue o modem ao controlador.

Itens a recolher:

- Cartão SIM
- Modem

1. Instale o cartão SIM no modem. Certifique-se de que a orientação do cartão SIM está correcta. Consulte [Figura 3](#).
2. Ligue o modem à porta USB da caixa USB. Consulte [Figura 4](#).
3. Certifique-se de que o modem está ligado à corrente e o LED LINK está a piscar.
4. Aguarde um mínimo de 5 minutos.
5. Se o indicador da intensidade do sinal do modem não mostrar duas ou mais barras, mova a caixa USB para uma localização que tenha um sinal 3G mais forte. Consulte a documentação do controlador SC1500.
6. Certifique-se de que o LED LINK pisca a cada 5 segundos para indicar que o modem está ligado à rede.
7. Instale a tampa na caixa USB. Consulte [Figura 2](#) na página 2.

Figura 3 Instalar o cartão SIM


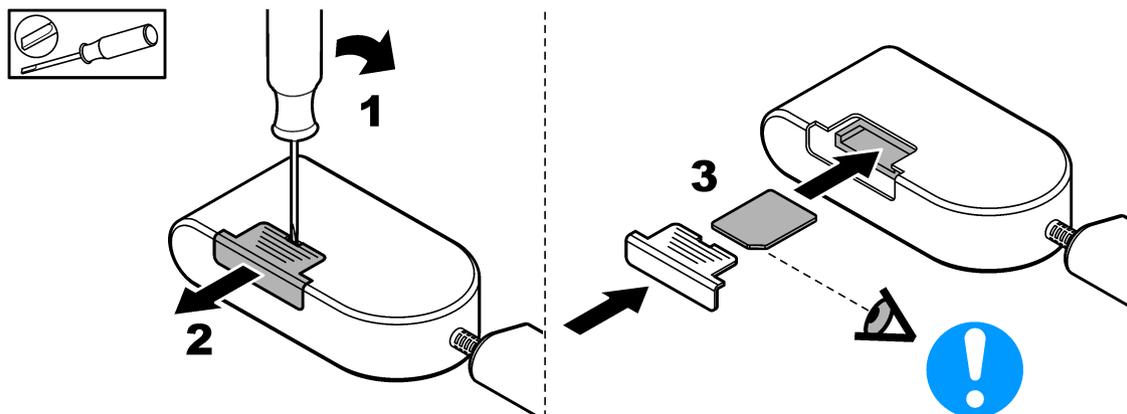


Figura 4 Ligar o modem

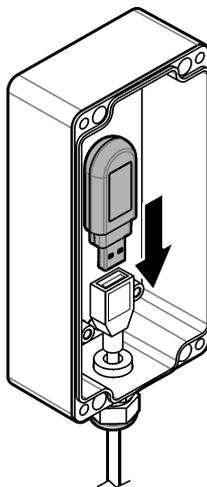

Controlador SC4200c

Para obter instruções sobre como ligar e configurar o modem com o controlador SC4200c, consulte a documentação fornecida com a caixa USB SC4200c.

DR3900

Ligar o modem


Ligue o modem ao DR3900.

Itens a recolher:

- Cartão SIM
- Modem

1. Instale o cartão SIM no modem. Certifique-se de que a orientação do cartão SIM está correcta. Consulte [Figura 3](#) na página 2.
2. Ligue o modem à porta USB na parte de trás do DR3900. Consulte [Figura 5](#).

Figura 5 Ligar o modem

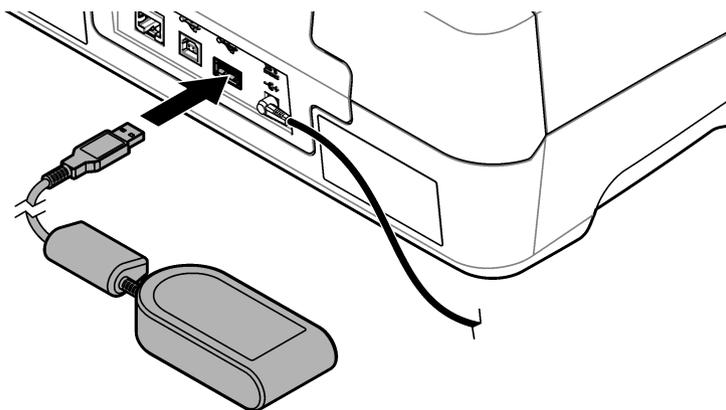

Configurar o DR3900

Configure o DR3900 com as informações do cartão SIM.

1. Certifique-se de que o DR3900 está configurado para ser utilizado com o modem da seguinte forma:
 - Se a opção "Process Jobs" (Processar tarefas) surgir no menu da barra lateral, o DR3900 está configurado para ser utilizado com o modem.
 - Se a opção "Link2SC" surgir no menu da barra lateral, o DR3900 não está configurado para ser utilizado com o modem. Contacte a assistência técnica.
2. Prima **Instrument Setup** (Configuração do equipamento).
3. Prima **PC & Printer** (PC e impressora).
4. Selecciona "Mobile Network: Not Connected" (Rede móvel: não ligada).
5. Prima **Setup** (Configuração).
6. Introduza o nome do ponto de acesso (APN), o nome de utilizador e a palavra-passe indicados nas informações do fornecedor.
7. Introduza o PIN do cartão SIM. Deixe o campo do PIN em branco se não estiver definido nenhum PIN.
8. Prima **OK**.
9. Certifique-se de que o ecrã mostra "Mobile Network: connected" (Rede móvel: ligada).

HACH COMPANY World Headquarters
P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
info-de@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl
6, route de Compois
1222 Vérenaz
SWITZERLAND
Tel. +41 22 594 6400
Fax +41 22 594 6499

